


Zonas de aplicación y Protocolos de aplicación de HIFU facial, lineal y multilínea

Protocolos de aplicación HIFU facial:

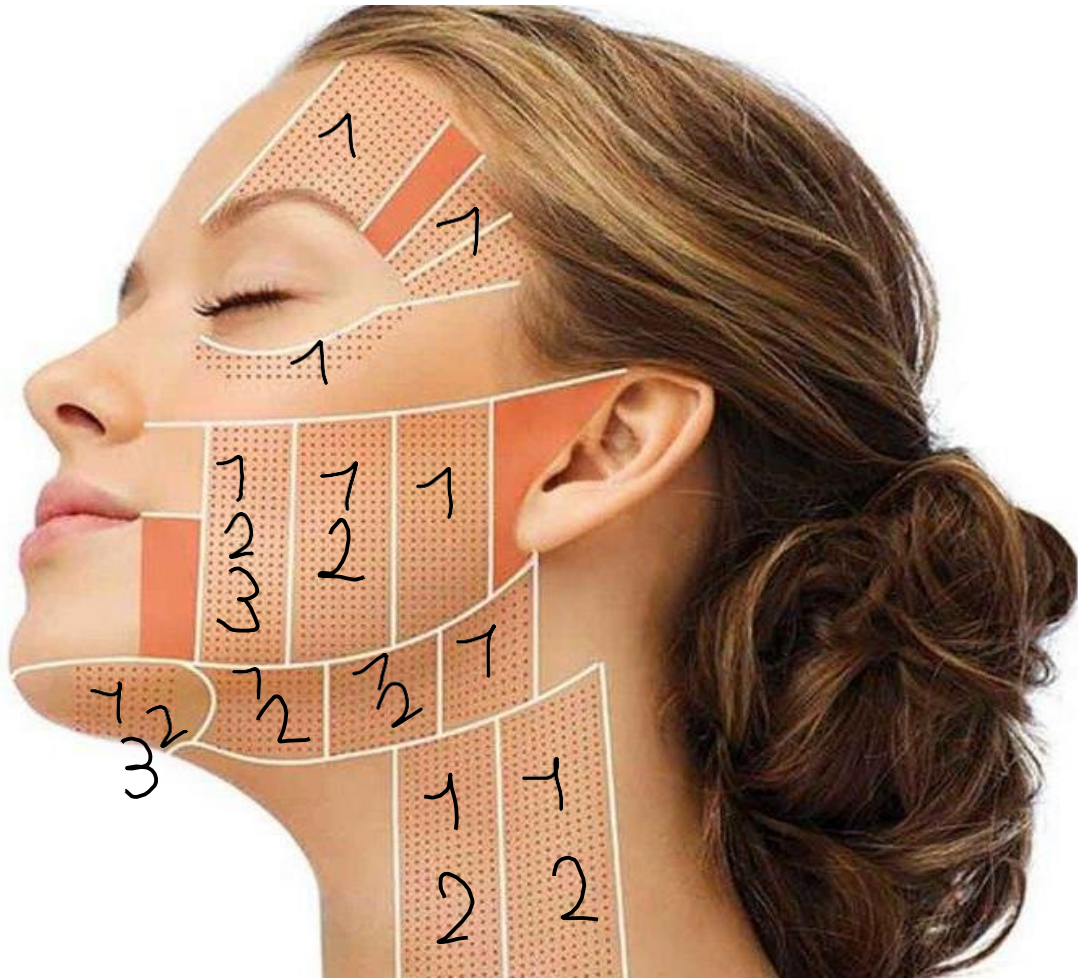

Descripción / Explicación Razonamiento de los números (Cartridge/Profundidad) de la imagen:


1 = 1.5mm - Profundidad / Cartridge
2 = 3.0mm - Profundidad / Cartridge
3 = 4.5mm - Profundidad / Cartridge

- En las zonas donde se encuentran el **1, 2, 3** se aplican los cartuchos: **4.5mm + 3.0mm + 1.5mm** en ese orden, primero el más profundo, en este caso el 4.5mm y sucesivamente.
- En la zona donde se encuentra el **1 y 2** se aplican los cartuchos **3.0mm + 1.5mm** en ese orden primero el más profundo en este caso 3.0mm y sucesivamente.
- En las zonas donde se encuentra el **1** se aplica el cartucho **1.5mm**

- La zona marcada en color rojo "**NO APLICAR**" ningún Cartridge

Zonas de aplicación y Protocolos de aplicación de HIFU facial, lineal y multilínea

***** Aplicar gel (una capa gruesa) siempre, en la zona de tratamiento.**

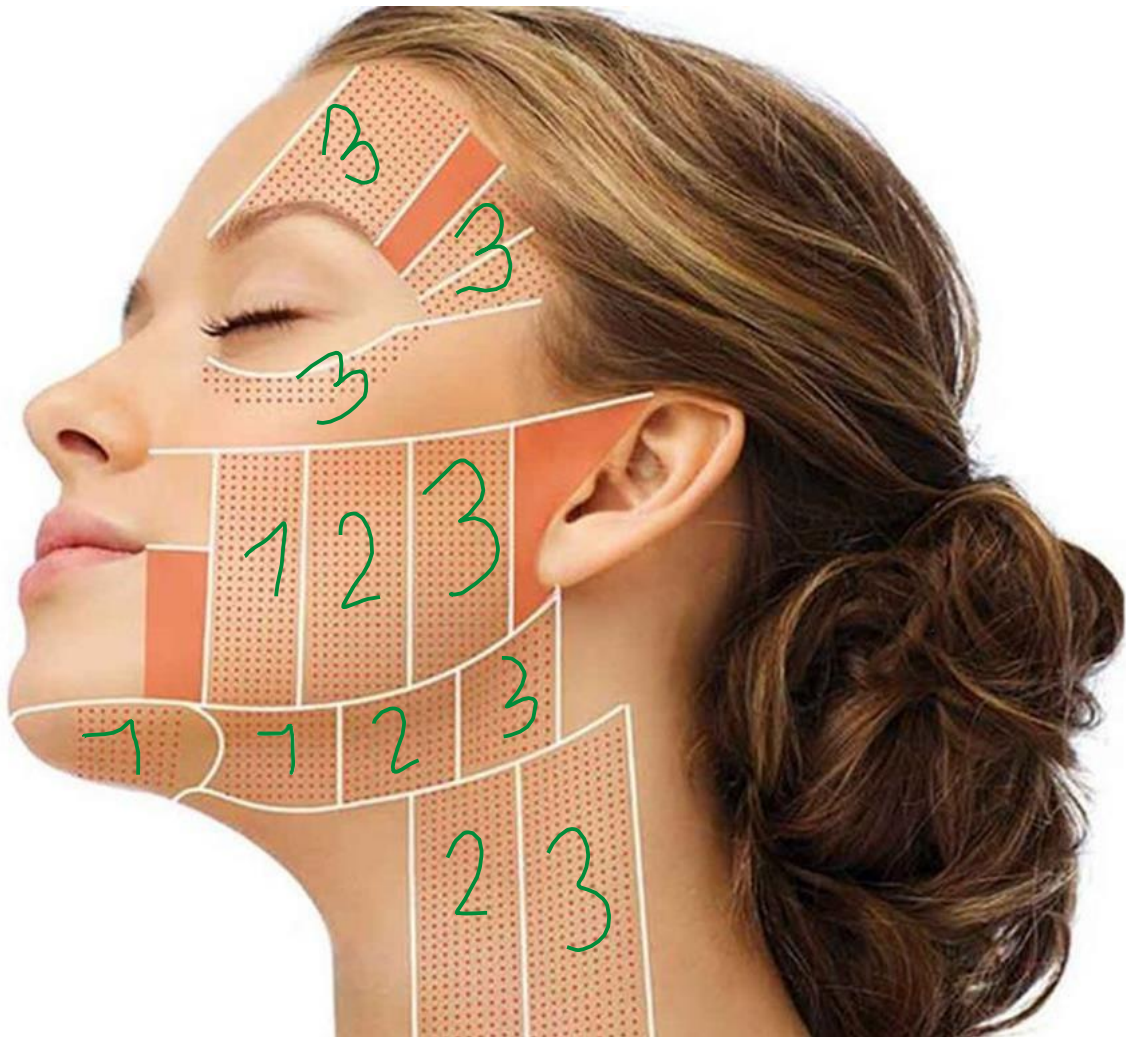

Se Inicia / comienza la aplicación por...:

.-. La zona indicada/marcada por el número **1** (en ambos lados de la cara) aplicar el Cartridge **4.5mm** de profundidad.

.-. A continuación, cambiar el cartucho/Cartridge al **3.0mm** y aplicar en las zonas marcadas con el número **1 y 2** (en ambos lados de la cara)

.-. Para finalizar, cambiar el cartucho al **1.5mm** y aplicar en los números **1, 2 y 3** (en ambos lados de la cara).


***** No olvidar de aplicar una capa gruesa de gel siempre, antes de la aplicación y si fuera necesario durante la aplicación.**

Zonas de aplicación y Protocolos de aplicación de HIFU facial, lineal y multilínea

Si el dispositivo dispone de Cartridge / Cartuchos Multilínea, usted puede aplicar entre **1 - 11 líneas** por cada Shot / pulso / Disparo.

La aplicación del número de líneas a aplicar con estos dispositivos, resulta mucho más fácil que el cartucho lineal, ya que, al permitir 11 líneas, esta se debe trasladar uno al lado del otro.

Además, aporta la ventaja de ser más homogéneo en la aplicación de una sola línea (Se debe tener en cuenta también que al ser más homogéneo en la aplicación también acumulara + energía en la zona aplicada):

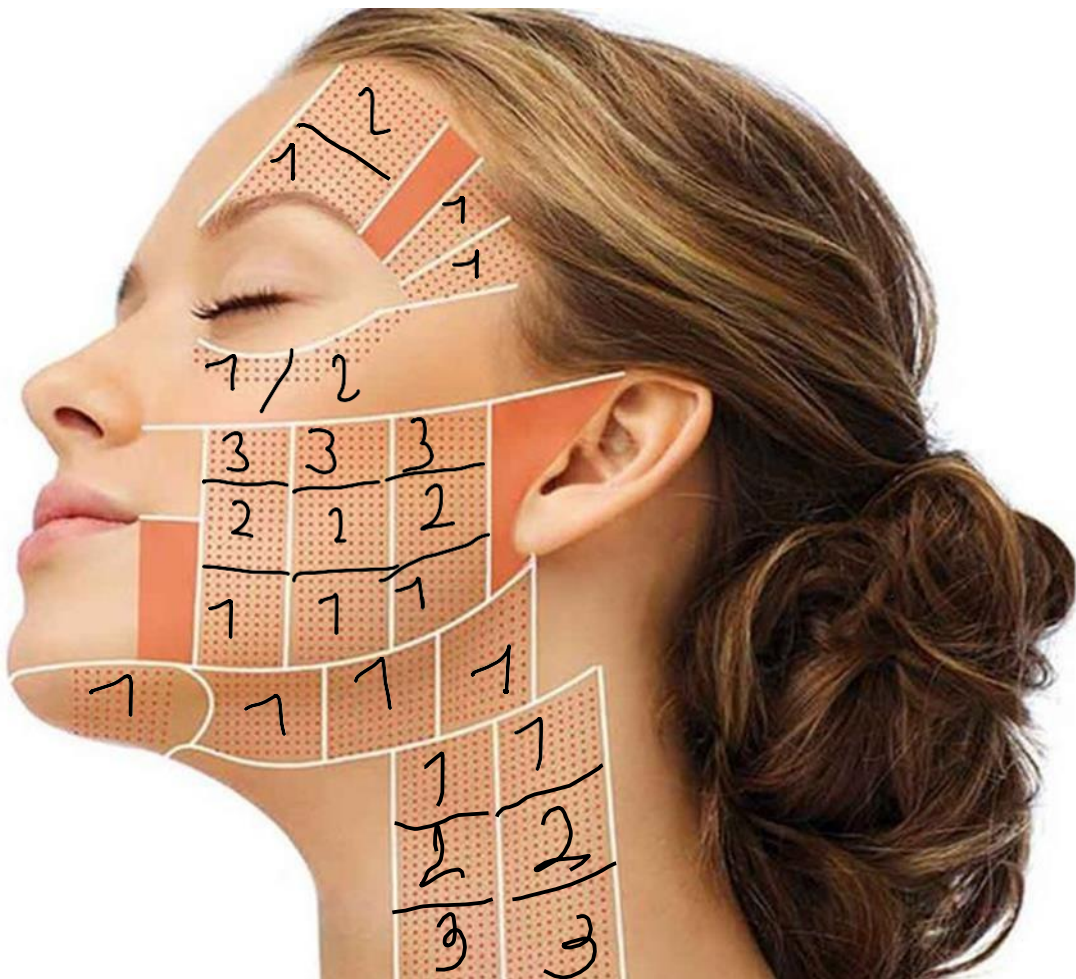

Hay que recordar que Cada aplicación / Disparo / Shot se debe casi solapar (realizar una al lado del otro, sin dejar zonas / áreas de aplicación sin aplicar [DENTRO DE LA ZONA MARCADA PARA LA APLICACIÓN](#))

Nunca, durante la misma aplicación, se debe repetir la aplicación en la misma zona ya aplicada y con la misma profundidad en la misma zona.

Si el tratamiento lo requiere puede aplicarse con otras profundidades.