




CO2 16ser Fraccional

Fraccional & Corte & Ginecología

3 sistemas en 1

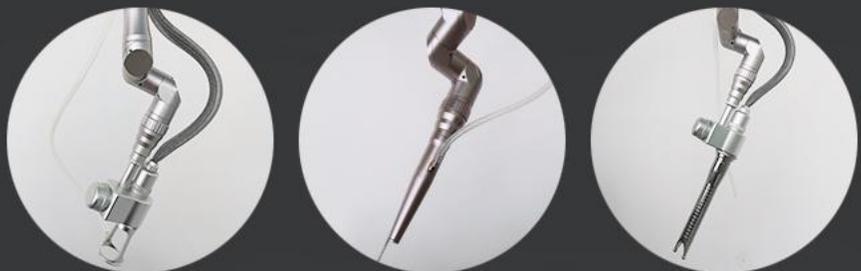


Apariencia

Diseño atractivo, con piezas de alta calidad.



- 1 Galvanómetro de escaneo láser
- 2 Pantalla táctil
- 3 Botón de emergencia
- 4 Brazo de láser
- 5 Interruptor de llave

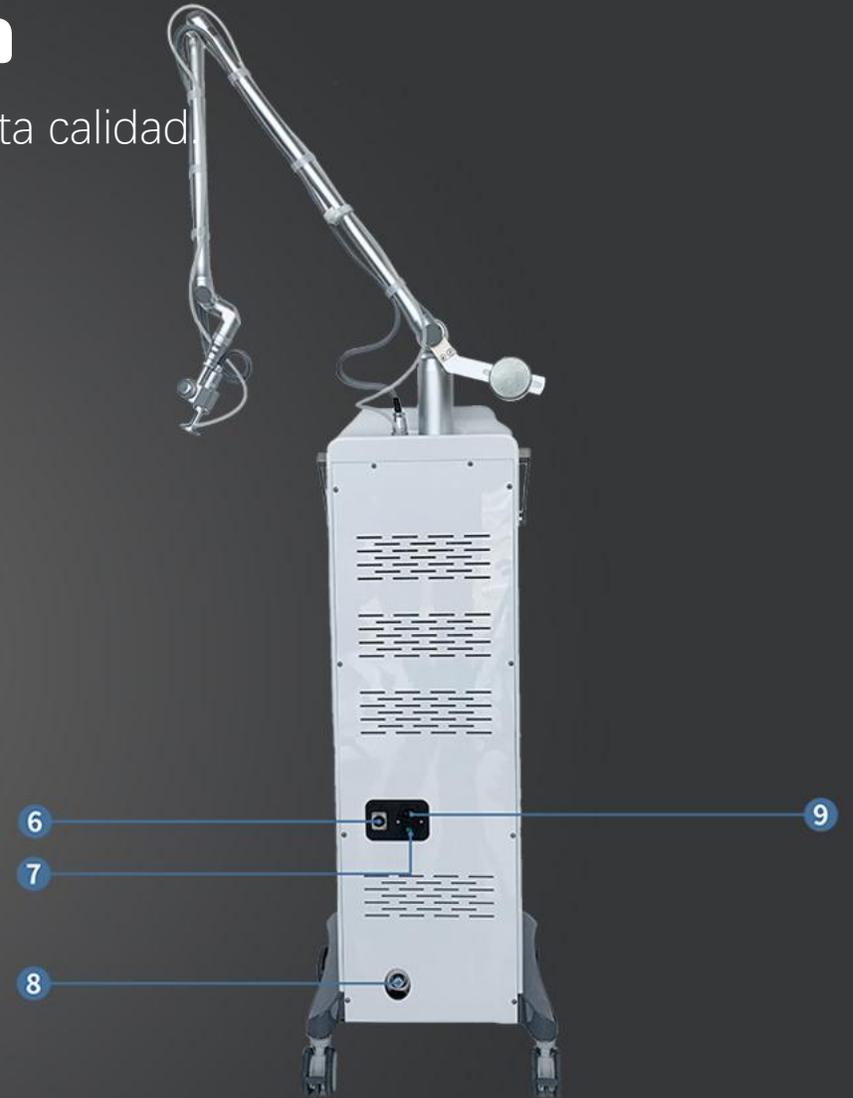

- 6 Conector de interruptor de pie
- 7 Interruptor de alimentación
- 8 Perilla de la bomba de aire
- 9 Conector del cable de alimentación

Ventajas


Piezas de alta calidad, larga vida útil.

- ✓ Sistemas 3 en 1 (Fraccional & Corte & Ginecología)
- ✓ 5-10 años de vida útil
- ✓ Tubo de RF importado desde la empresa Coherent de EE.UU
- ✓ el brazo de 7 articulaciones importado desde Corea
- ✓ 14 formas de dibujos innovadoras
- ✓ Corriente alterna RF, más segura



tubo I6ser de RF coherente de EE. UU.

Utilizamos tubos de láser de RF de alta calidad importados desde Coherent de EE. UU.

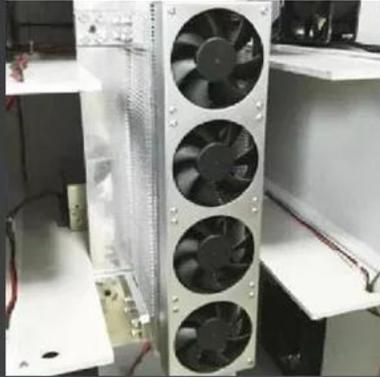

VS

Energía fuerte y estable
voltaje bajo, más seguro.

Larga vida útil

Fácil de instalar



YES



NO



Energía débil y desigual

Voltaje alto, no seguro

Corta vida útil

Difícil de instalar

Brazo de 7 articulaciones importado desde Corea

El brazo de 7 articulaciones de guía de luz importada coreana con menos pérdida de energía

El brazo de 7 articulaciones de guía de luz importada coreana, lo que reduce en gran medida la pérdida de energía.

El escáner de alta precisión hace que el tratamiento sea más preciso y más rápido

Operación conveniente y flexible, apariencia elegante y hermosa.

Escáner de alta precisión

Escanear gráficos más precisa y rápida



Salida de aire

Mejorar la experiencia y la seguridad del tratamiento

3 sistemas en 1



**Fraccionario
Sistema**



**Corte
Sistema**



**Ginecología
Sistema**

14 formas de dibujos innovadoras

14 dibujos cubren todas las áreas de tratamiento



Ofrecemos 14 dibujos. Y son los más estándares, los puntos son los más pequeños y la disposición es la más uniforme, con los mejores resultados clínicos.

Cada pequeña columna fraccional se regenera en un día. Esto minimiza el riesgo de cicatrices, infecciones o cambios de pigmentación a largo plazo.

Puntas de tratamiento

Diferentes puntas de tratamiento para tratamientos de diferentes áreas.



>> Consejos fraccionales y de corte



Punta fraccionada:

Rejuvenecimiento y estiramiento de la piel
Eliminación de arrugas
Eliminación de cicatrices (cicatriz quemada, cicatriz de cirugía, cicatriz de acné)
Eliminación de estrías.
Recuperación del daño solar. Etc ..



Punta de corte:

Eliminación de lunares y todo tipo de verrugas
Extirpación de tumores

Puntas de tratamiento

Diferentes consejos de tratamiento para tratamientos de diferentes áreas.



>> Ventajas para la vagina


Apriete: Potente y prolongado

Lubricante: Aumenta la secreción, elimina la sequedad.

Sensibilidad: regeneración celular, mejora la reacción.

Salud: tratamiento de vaginitis leve, mejora la incontinencia

Belleza: rejuvenecimiento de las vulvas, aclara los pigmentos

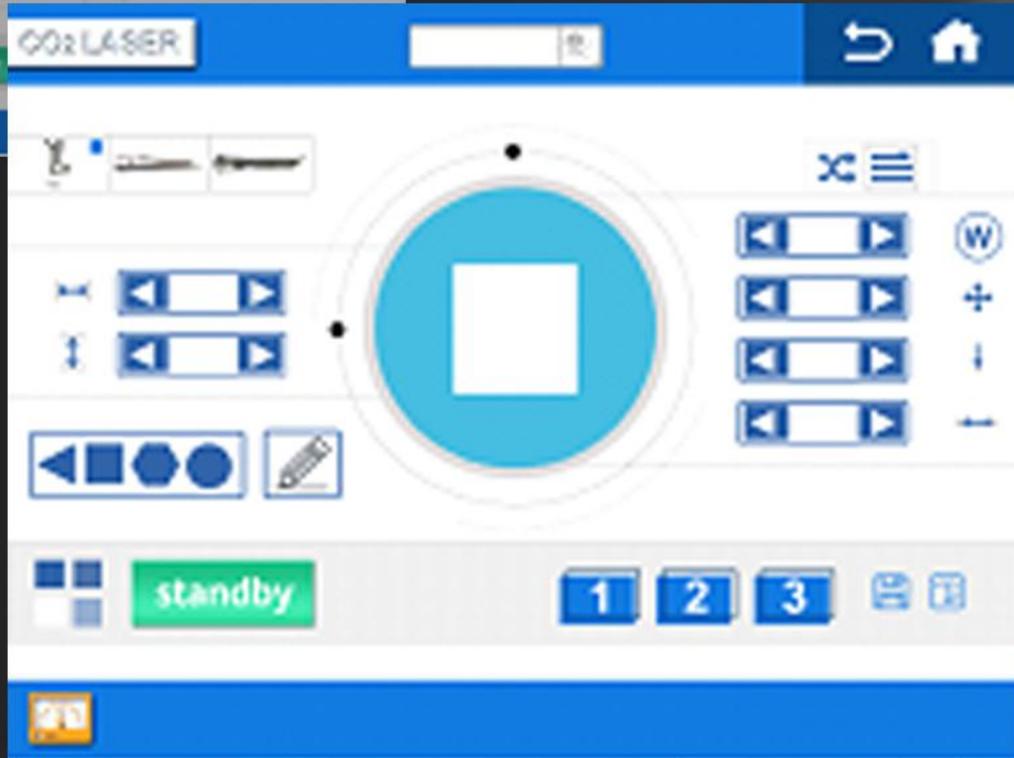

Interfaz f6cil

Sistema operativo
inteligente

Parámetros preestablecidos

Almacenamiento de
registros de tratamiento

15 idiomas disponibles

Sistema de monitoreo

Sistema alarmante

Modalidad de alquiler

Sistema de monitoreo

El sistema de monitoreo avanzado hace que el trabajo de posventa sea mucho más fácil y rápido.



S12V
D12V
DOUT
S24V
L12V
ESC

Cada línea representa una parte específica de la máquina.

S12V significa voltaje de control

D12V significa tablero de control

DOUT significa sistema de enfriamiento

S24V significa bomba de agua

L12V significa fuente de alimentación de corriente constante

En caso de que haya algún problema, el cliente puede verificar primero el sistema de monitoreo para saber qué parte está mal, luego podemos enviar inmediatamente la nueva parte.

Sistema alarmante

La alarma de la máquina no significa que la máquina tenga un problema. Por el contrario, es una forma de autoprotección inteligente de la máquina.



Velocidad del flujo de agua

Le recuerda al cliente que se cambie a nuevos filtros de agua.



Temperatura del agua

Le recuerda al cliente que haga la calibración de temperatura.



Agua Impureza

Eso recuerda al cliente que se cambie a agua nueva.



Agua Nivel

Le recuerda al cliente que ponga suficiente agua en la máquina.



Estado del botón andle

Le recuerda al cliente que suelte el botón y luego se ponga en marcha.

Sistema de ahorro de registros de tratamiento

Guarde el parámetro de tratamiento para el cliente para que la próxima vez pueda usarlo directamente.



Cada paciente tiene un tono de piel y un tipo de cabello diferentes. Incluso los pacientes que tienen un tipo de piel y cabello similar pueden tener una tolerancia diferente al dolor.

Entonces, cuando se realiza el tratamiento a un nuevo cliente, el médico generalmente tiene que intentarlo con poca energía en la piel del paciente y encuentre el parámetro más adecuado para este paciente específico.

Nuestro sistema permite al Doctor guardar este parámetro más adecuado para este paciente específico en nuestro Sistema de almacenamiento de registros de tratamiento. Así que esoLa próxima vez que este paciente vuelva, el médico puede buscar directamente sus parámetros bien probados y comenzar el tratamiento rápidamente.

Sistema de alquiler

Es una gran función para los distribuidores que tienen negocios de alquiler de máquinas.
¡Permite al distribuidor controlar la máquina a distancia!

Por ejemplo,
Lily ha alquilado esta máquina durante 1 mes, puede establecer una contraseña de 1 mes para ella. Después de 1 mes, la contraseña no será válida y la máquina se bloqueará. Si Lily quiere usar la máquina continuamente, primero debe pagar por ti.

¡Es muy conveniente para usted controlar sus máquinas!



Interruptor de la marca Schneider

Relé de estado sólido

Tubo de RF de metal coherente de EE. UU.

Pantalla táctil en color ture de 10,4 "

Piezas de alta calidad

Cada pieza de repuesto que utilizamos es la mejor, cada línea es clara.
Una buena estructura asegura una buena calidad.



Ventilador de aire grande de 24 V para enfriar

Chip de procesador de 32 bits de desarrollo propio

7 articulaciones brazo guía menos pérdida de energía

Chip de procesador de 32 bits de desarrollo propio

Specification

Especificaciones	Láser de CO2 fraccional		
Fuente láser	Tubo metálico de RF coherente de EE. UU.		
Longitud de onda láser	10600 nm		
Sistema de transmisión de haz	50W		
Haz de apuntar	7 articulaciones brazo guía óptico articulado		
Tamaño de la mancha	Láser de diodo rojo de 650 nm, potencia del láser 0,1-5 mW		
Sistema de extracción de humo	0,08 mm a 0,12 mm		
Sistema de refrigeración	Soplado de aire incorporado		
Monitor	Pantalla táctil en color verdadero TFT de 10,4 "		
Consejos de tratamiento	Punta fraccionada: 3 piezas		
	Punta de corte: 1 pieza		
	Consejo de cuidado vaginal: 3 piezas (opcional)		
Trabajo en espera	Trabajo en espera continuo durante 10-12 horas		
Eléctrico	100 / 110V, 50 ~ 60Hz, / 230V ~ 260V, 50 ~ 60Hz		
Peso neto	60KG	Peso bruto	73 kg
Dimensión de embalaje	54 * 68 * 136 cm (ancho * profundidad * alto)		

Specification

Especificaciones	Modo fraccional y vaginal	Modo de corte
Energía	1-400 mJ / punto	/
Poder	1-50W	1-50W
Tasa de repetición	1 Hz-1000 Hz	/
Distancia de puntos	0,1-2,6 mm	/
Duración del punto	0,1-10 ms	0,1-10 ms
Intervalo de puntos	10-5000ms	10-5000ms
Forma	14 Escanear gráficos	/
Patrón	Matriz, aleatoria	/
Área de escaneo	20 * 20 mm	/
Modo de salida láser	/	Salida continua, salida de pulsos